


Soluciones Sefar para kits de infusión

El tejido SEFAR MEDIFAB con una apertura de malla de < 20 µm asegura que, durante una infusión, no entren partículas extrañas en la corriente sanguínea del paciente. Ofrecemos cintas, tubos y bolsas.

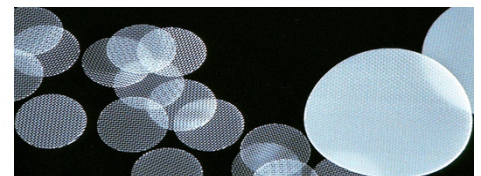

Propiedades del producto

Función

Los filtros de infusión sirven como filtros de seguridad. La función asegura la retención de partículas (ISO 8536-4). La fuente de tales partículas puede ser el frasco de infusión, bolsa de infusión o la solución de infusión (por ejemplo, nutrientes agregados o compuestos farmacéuticos).

Las membranas SEFAR MEDITEX se utilizan para ventilar sistemas de infusión (ISO 8536-4). La construcción de la membrana garantiza una alta permeabilidad del aire, evitando la entrada de virus y bacterias, así como la fuga de líquidos.

DOWNLOADS

Folleto: Medical Components (PDF 3997 kb)

Informaciones para el cliente: SEFAR MEDIFAB Fabrics are Low Protein Binding (PDF 208 kb)

Beneficios para el cliente

Tejidos

- Las dimensiones precisas de la tela
- Propiedades homogéneas del material
- Excepcional consistencia de un lote a otro
- Características de superficie definidas
- Altas tasas de rendimiento

Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Phone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com


[A la página de productos](#)

-
- Excelente eficiencia de retención de partículas
 - Sin derramamientos debido al hilo monofilament
 - Altas tasas de absorción debido a las construcciones de tejido específicas
 - Alta mojabilidad debido a recubrimientos superficiales hidrófilos
 - Inigualable estabilidad bidimensional
 - Buena esterilización
-


Membranes

- Propiedades homogéneas del material
 - Excepcional consistencia de un lote a otro
 - Alta permeabilidad del aire
 - Pérdida de presión mínima
 - Protección contra virus y bacterias
 - Procesamiento fácil
-

Gama de productos

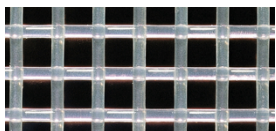

■ SEFAR MEDIFAB

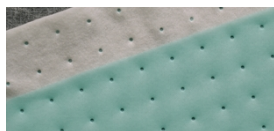

■ SEFAR MEDITEX
PORE


Sefar AG

Headquarters
Hinterbissastrasse 12
9410 Heiden
Switzerland

Phone +41 71 898 5700
Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[A la página de productos](#)

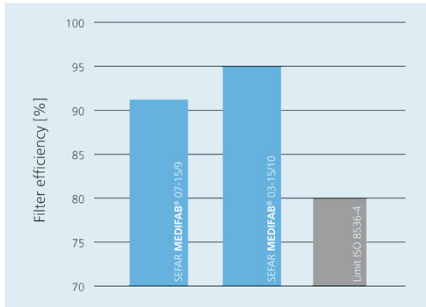

Eficiencia de filtración

Eficiencia de filtración de las partículas de 20 micras de SEFAR MEDIFAB 03-15/10 y 07-15/9 en comparación con los requerimientos ISO.

Para más información y muestras de tejidos, seleccione la opción de contacto preferida a la derecha.

Locations



Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland
 Teléfono [Teléfono]
 Fax +41 71 898 5721

[E-Mail](#)



Sefar AG

Töberstrasse 4
 9425 Thal – Switzerland
 Teléfono [Teléfono]
 Fax +41 71 886 3504

[E-Mail](#)

Sefar AG

Headquarters
 Hinterbissastrasse 12
 9410 Heiden
 Switzerland

Phone +41 71 898 5700
 Fax +41 71 898 5721

info@sefar.com

[A la página de productos](#)