

## 流化床干燥袋

流化床干燥袋用于干燥、结聚和涂膜工序。Sefar是流化床干燥机、过滤机和配件用现成干燥袋的领先制造商之一。



### 产品特征

#### 用于流体床干燥机的赛发过滤解决方案

流化床技术用于许多应用中，比如制药业的制粒工艺或是精细化工生产中的粉末混合，凝聚，造粒，定型，干燥，包衣或微粉化等工艺。

在过去的25年中，赛发专注于化工、食品和制药行业中流化床干燥袋的开发。和Glatt或Bosch Hüttlin等领先的设备制造商一起，制定了市场中最高的质量标准。

目前为止引进了大量增强流化床干燥机的安全和性能的特性：

- 独特的焊缝实现最低的颗粒损失
- AETX特定网布并对成品干燥袋进行导电性测试以避免由于静电放电导致爆炸
- 独特的可定制标签实现卓越的可追溯性和识别度
- 各种盖帽设计用于不同的设备类型
- 所有裙边选项实现简易安装（绳索和拉链等）

无论客户使用顶喷或是底喷、单袖筒滤带或是多袖筒八爪鱼干燥袋或是（包衣用）微丸包衣盖帽式滤袋，赛发都是提供抗静电FBDB的最佳合作伙伴。

### DOWNLOADS

手册: Process Filtration (PDF 5300 kb)

### 加工方案

Sefar为提升流化床干燥袋的安全性及性能所开发的创新举措：

- 焊接拼缝可使颗粒损失最小化

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721



[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[转至产品页](#)


- 对成品包含的每一个干燥袋进行电导率测试，以避免静电放电造成爆炸
- 独特的定制化标签，实现对产品的可追溯和识别

锥形帽

流化床干燥袋

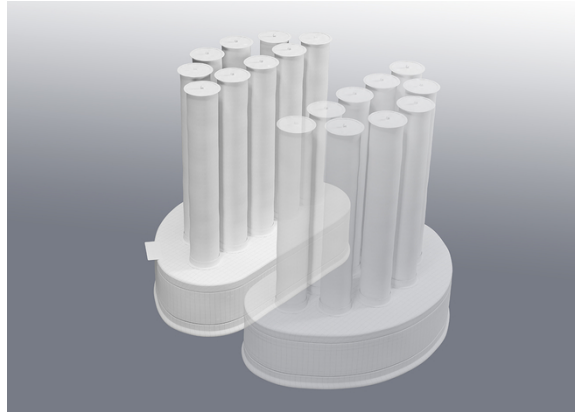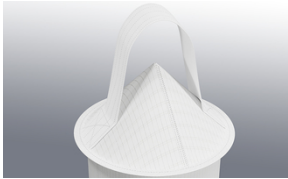

平顶帽

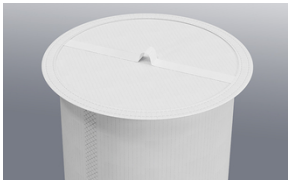

Twin shaker or D-type FBDB

流化床干燥器用于干燥、制粒和包衣。赛发是该行业领先的定制过滤器制造商之一，让我们成为您获取备件的最佳合作伙伴。

## 赛发与设备制造商

我们的产品满足这些过滤应用的具体需求并成功用于世界所有知名流化床干燥机品牌设备制造商，比如：

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[转至产品页](#)


|                        |                              |                  |                         |
|------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|
| Glatt                  | GEA<br>(Aeromatic)           | Powrex           | Fluid Air               |
| Freund<br>Vector       | Oystar<br>Hüttlin<br>(Bosch) | Bectochem Lödige | FPS (Foodpharmasystems) |
| O'Hara<br>Technologies | Romaco<br>(Innojet)          | Diosna           | Tapasya                 |

### 网布技术


Sefar拥有完整系列的特殊抗静电网布，对应各类使用要求的流化床干燥袋。该系列网布旨在实现高颗粒截留率和高通量之间的最佳平衡，其透气率在65 - 300 l/m<sup>2</sup>s。



SEFAR TETEX MULTI  
07-65-180 WA PHARMA

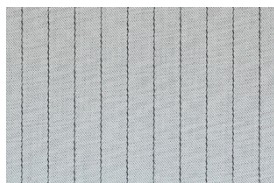

SEFAR TETEX MULTI  
03-110-168 WA PHARMA

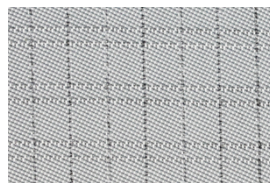

SEFAR TETEX MULTI  
07-100-150 WA PHARMA

### 专为生命科学行业而制

Sefar严格把控每一个关键的生产环节，从纱线生产到最终的过滤用成品，可实现所有

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[转至产品页](#)

关键部件的完整可追溯性。独特的市场地位使我们能够为客户提供可满足他们所有质量级别和合规性要求的产品。

Sefar为满足制药行业的严格要求不断完善制造加工工艺。我们遵循严格的GMP规范,独有的符合GMP规定的过滤用产品均在洁净室中生产加工。

Sefar客户可以在三个不同的质量等级之间选择以根据成本效益比率完美适合他们的需求。



- EC 1935/2004
- EU 10/2011
- GMP EC 2023/2006 or cGMP
- FDA CFR 177
- ISO 9001
- 电导率测试
- ATEX Directive 2014/34/EU & TRGS 727
- 独立包装
- 标签选项
- 可溯源性





## 联系我

- 当地联系人
- 联系表单
- 发送电子邮件

请致电我们以获取更多信息:

电话 CH: +41 71 898 5700

## Locations



### Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

■ E-Mail



### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

■ E-Mail

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[转至产品页](#)