
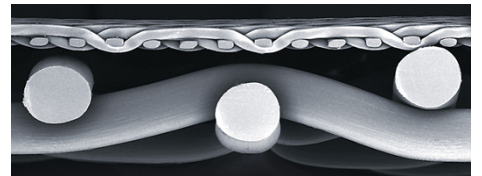
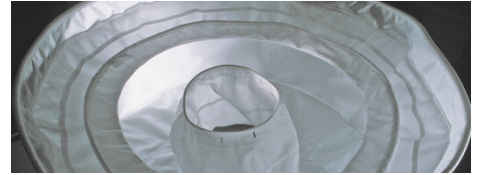


## 离心机滤片与滤袋

Sefar为用于化工、制药和生命科学产业的各种离心机提供创新解决方案。我们的产品满足所有这些过滤或干燥应用的特定需求。

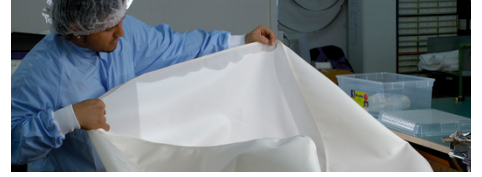

### 产品特征

#### Sefar离心机过滤解决方案


并可以在同一离心机以相同的速度进行清洗。离心机用于不持续的或分批次的操作。使用专用的赛发网布能够将滤饼中残留的水分降到最低。一般应用于生物科学、制药（API、胰岛素和肿瘤学）和需要高纯度和密闭过滤系统的精细化学品，还可应用于食品（淀粉和树薯粉）以及环境（FGD和石膏）等。离心机的运行原理是通过离心力的作用，使用滤布作为过滤介质将固体与液体分离。高速旋转产生强大的离心力，可以让进料中悬浮的固体在过滤介质表面沉淀，根据自动化程度、货物尺寸以及固体排放，不同的离心机类型需要过滤介质：

- 袋式离心机（顶部卸除）
- 刮刀卸料离心机（立式和卧式）
- 翻袋卸料离心机

赛发为用于化学、制药、食品和生命科学领域的各种离心机提供创新的过滤解决方案。

翻袋式离心机

离心机滤袋

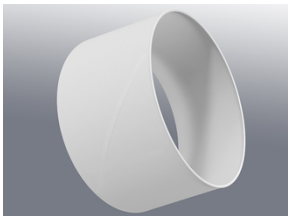

#### DOWNLOADS

手册: Process Filtration (PDF 5300 kb)

Sefar AG


Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

info@sefar.com

转至产品页

离心机滤片

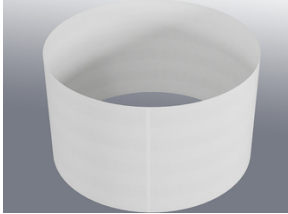

赛发与设备制造商

我们的产品满足这些过滤应用的具体需求并成功用于世界所有知名离心机品牌设备制造商，比如：

Heinkel      Comi Condor      KMPT Andritz (smart fix)      Rousselet Robatel

Cima      Ferrum      Alfa Laval      Frewitt

Matsumoto      MKK Mitsubishi      Riera Nadeu      D. Parik

Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

info@sefar.com

[转至产品页](#)

Sefar离心过滤机用产品与使用的过滤机配套，包括带式离心机、袋式离心机或翻袋式离心机。

公司现成的解决方案基于优化的Sefar设计，已经多年的实际工作使用认可。

凭借公司范围广泛的生产能力和技术，我们能够为客户提供自定义产品，以实现最佳匹配和功能。

## 网布技术

赛发的双层网布（DLW）技术结合使用精细网布（用于颗粒截留）和一个集成衬网（用于排液）于一体。此网布可由多种聚合物制成，比如PP、PET和PEEK，按照客户的化学和热需求为他们提供最佳解决方案。

SEFAR TETEX DLW网布在我们的欧洲编织工厂使用赛发纱线制作而成，满足最高的质量要求，并提供决定性的优势。

- 停工时间短
- 产品收率高
- 安装方便
- 滤饼脱落性能优异


除SEFAR TETEX DLW网布外，我们也提供单丝和复丝滤布，品牌为SEFAR TETEX MONO和SEFAR TETEX MULTI，以满足多种多样的离心机市场中的所有需求，比如最大渗透性和最佳清洁性或最大颗粒截留、强度和滤布柔性。

除了基于ISO9001的高质量制造外，赛发还设定了在涉及认证时的行业标准。我们的过滤器具有与EU和FDA食品法规相关的所需证书。专用网布的外部认证迁移限制（如SEFAR TETEX DLW PHARMA）可通过公司内部对生产的每个批次进行可萃取测试进行强调。


双层网布



单丝网布

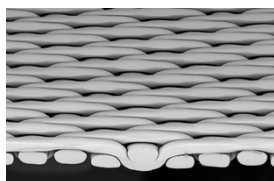

复丝网布

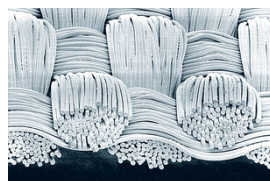

### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

info@sefar.com

[转至产品页](#)

- 带一体的衬网，提供优异的排泄性能和稳定性
- 实现最高渗透率和最佳清洁再生性能
- 实现最高颗粒截留效果，强度和布料柔软度高

### 专为生命科学行业而制

Sefar严格把控每一个关键的生产环节，从纱线生产到最终的过滤用成品，可实现所有关键部件的完整可追溯性。独特的市场地位使我们能够为客户提供可满足他们所有质量级别和合规性要求的产品。

Sefar为满足制药行业的严格要求不断完善制造加工工艺。我们遵循严格的GMP规范,独有的符合GMP规定的过滤用产品均在洁净室中生产加工。



- EC 1935/2004
- EU 10/2011
- GMP EC 2023/2006 or cGMP
- FDA CFR 177
- ISO 9001
- 独立包装
- 标签选项
- 可溯源性



### 联系我

- 当地联系人
- 联系表单
- 发送电子邮件

请致电我们以获取更多信息：  
电话 CH: +41 71 898 5700

### Locations

#### Sefar AG

Hinterbissastrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland

电话 +41 71 898 5700  
传真 +41 71 898 5721

[info@sefar.com](mailto:info@sefar.com)

[转至产品页](#)



Sefar AG

Töberstrasse 4  
9425 Thal – Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 886 3504

 E-Mail



Sefar AG

Hinterbissaustrasse 12  
9410 Heiden  
Switzerland  
Phone: +41 71 898 5700  
Fax: +41 71 898 5721

 E-Mail